

dermadrive™

Systeme de greffe de peau Dermatome

SÉRIE GD




deSoutter
MEDICAL

GD SYSTÈME DE GREFFE DE PEAU


Le nouveau Dermatome de la série GD conçu par De Soutter Medical est compact et ergonomique.

Il permet de réaliser des greffes de peau de tailles uniformes et constantes. Son action de coupe lisse à haute vitesse assure une procédure sans effort et sans vibration. La tête du Dermatome GD-113 est conçue pour une utilisation avec la console CM2.

Grâce à une monture E, le Dermatome GD-113 peut être utilisé avec les pièces à main ECV et EPV de la gamme ERGOPLUS De Soutter.

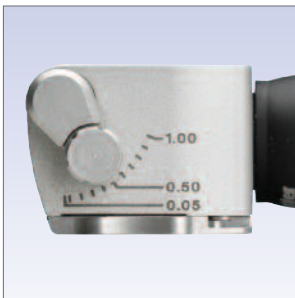

Les épaisseurs de coupe sont facilement sélectionnables et stables grâce à la jauge de profondeur calibrée. L'épaisseur des greffes de peau de 0,05 mm à 1,00 mm est réglable par incréments de 0,1 mm.

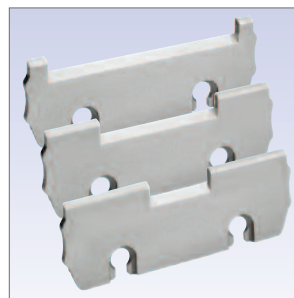

Trois platines de coupe différentes permettent d'obtenir des greffes de 23 mm, 48 mm et 73 mm de largeur.



Les lames Stéricut à double facette ultra tranchante procurent une excellente performance de coupe.


Ces lames sont conditionnées par boîte de 5 unités stériles.

Le Dermatome GD-113 permet un remplacement simple et sécurisé des lames.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DERMADRIVE

	Largeur de coupe en mm	Épaisseur de coupe en mm	Vitesse de fonctionnement cycle/min	Poids kg
	73	0,05 - 1,00	2000 - 15000	0,28
La tête du Dermatome est fournie par défaut avec une platine de 73 mm. Platines en option : Largeur de coupe 48 mm - Référence 17260 Largeur de coupe 23 mm - Référence 17340				

MICROMOTEUR ET ALIMENTATION

La tête du Dermatome se fixe rapidement sur le micromoteur universel qui est alimenté par le contrôleur CM2 à vitesse variable. Le moteur peut être commandé soit par une pédale soit directement à partir du contrôleur. Veuillez préciser la tension et la configuration de prise lors de votre commande.



Caractéristiques électriques

Tension : 230/115/100 50-60 Hz


Alimentation : 60VA

Dimensions : 181 x 101 x 119 mm

Poids : Console / moteur 1,79/0,12 kg

CONTENEUR DE STÉRILISATION

Ce système adapté et compatible vous permet de conserver vos instruments en bon état à tout moment. Le conteneur est 100 % stérilisable par vapeur, chaleur sèche (par flash) à 160°C, oxyde d'éthylène ou irradiation gamma.

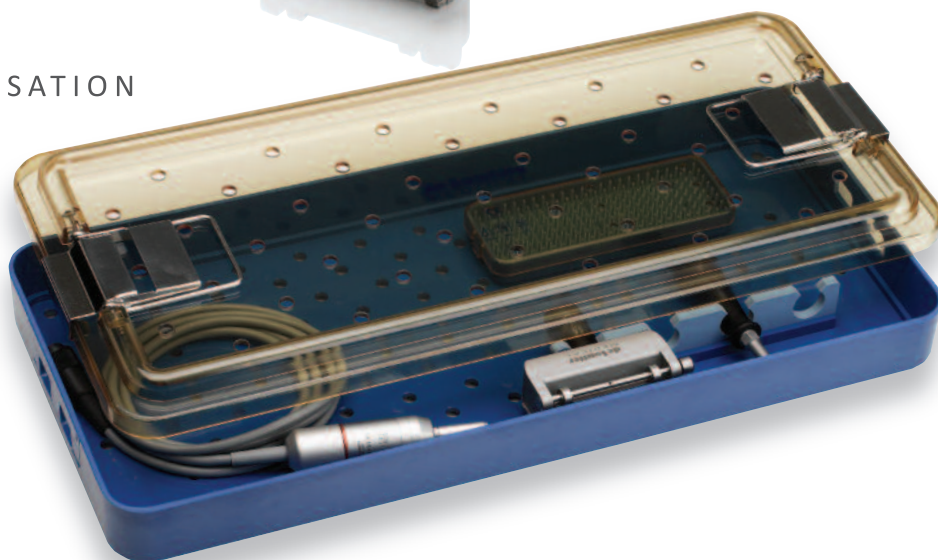

POUR COMMANDER

Éléments de système	Référence	Cordon secteur 3 mètres. Précisez la référence svp	
GD-113 tête	17200	UK	8290
CM2 micro moteur, boîtier de contrôle & pédale	1292334	Euro	8300
Lames (pack de 5)	S11-103	US/Canada	8310
Conteneur de stérilisation	8570	Australie	8320
Référence du système complet	GDA-113/CM2	Nouvelle-Zélande	8320
		Suisse	14700

**Pour obtenir plus d'informations sur la gamme
de produits De Soutter Medical, veuillez
contacter votre représentant local**

ROYAUME-UNI (SIÈGE SOCIAL INTERNATIONAL)

De Soutter Medical Limited
Halton Brook Business Park, Weston Road, Aston Clinton, Aylesbury, Bucks HP22 5WF
Tel: +44 (0) 1296 634 000 Fax: +44 (0) 1296 634 033
Email: info@de-soutter.com

AUSTRALIE

De Soutter Medical Australia Pty Ltd
2/12-14 Apollo Drive, Hallam, Victoria 3803
Tel: +61 (0) 3 9702 4441 Fax: +61 (0) 3 9702 4484
Email: australia@de-soutter.com

AUTRICHE

De Soutter Medical Austria
Zweigniederlassung Österreich, Dietrichsteingasse 10, A-3400 Klosterneuburg
Tel: +43 (0) 676 96 71 770 Fax: +43 (0) 2243 21 656
Email: austria@de-soutter.com

BELGIQUE

De Soutter Medical Belgium
In De Bruel 30, 3620 Lanaken
Tel: +32 (0) 89/47 15 37 Fax: +32 (0) 89/70 12 19
Email: belgium@de-soutter.com

FRANCE

De Soutter Medical France
949 Avenue Parc des Expositions, 33260 La Teste de Buch
Tel: +33 (0) 5 56 54 89 36 Fax: +33 (0) 9 70 61 37 60
Email: france@de-soutter.com

ALLEMAGNE

De Soutter Medical Germany
Bahnhofstraße 4, D-66625 Nohfelden
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46 Fax: +49 (0) 68 52-99 12 47
Email: deutschland@de-soutter.com

ITALIE

De Soutter Medical Italia
Localita' Fornace SNC, 27022 Casorate Primo - PV
Tel: +39 (0) 2 9009 4098 Fax: +39 (0) 2 9009 2673
Email: italy@de-soutter.com

PAYS-BAS

De Soutter Medical Nederland
Gelderlandhaven 2X, 3433PG Nieuwegein
Tel: +31 (0) 85 0491480 Fax: +31 (0) 85 0491489
Email: nederland@de-soutter.com

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

De Soutter Medical USA, Inc.
224 Rolling Hill Road, Suite 12A, Mooresville, NC 28117
Tel: +1 (704) 655 9040 Fax: +1 (704) 987 2035
Email: usa@de-soutter.com

www.de-soutter.com

120-FR-7